

Informace pro oddělení FNO a pacienty

Pokyny k odběru stolice odběrovým systémem firmy CerTest

Pokyny k odběru stolice odběrovým systémem firmy CerTest


Univerzální odběrové soupravy firmy CerTest slouží k jednoduchému, neinvazivnímu vyšetření vzorku stolice pro kvantifikaci různých laboratorních parametrů a diagnostice převážně gastrointestinálních onemocnění.

Pokyny pro pacienta/oddělení před vyšetřením

- Strava bez omezení, není potřeba dodržovat žádnou dietu ani eliminovat medikaci.
- Test pro kvantifikaci hemoglobinu není vhodné provádět při průjmu, krvácení z hemoroidů nebo při menstruaci.
- Test pro stanovení pankreatické elastázy 1 není ovlivněn souběžnou enzymovou substituční léčbou.

Odběr vzorku

- Odběr stolice je nutné provést v suchém a čistém prostředí, před odběrem je doporučeno se vymočít, vzorek nesmí být kontaminován močí.
- Testovací zkumavku označte jménem a datem odběru.
- Odběrovou zkumavku držte při manipulaci ve svislé poloze.

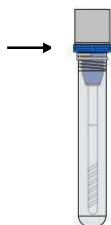

- Otevřete bílý uzávěr a vysuňte kartáček, mezi jehož rýhy (zářezy) opakovaným tahem z různých 4 míst povrchu stolice naberte vzorek. Dostatečné množství vzorku je takové, aby byly zaplněny zářezy na odběrovém kartáčku – zkumavku nepřepĺňujte.



- Kartáček s nabranou stolicí zasuňte zpět do zkumavky a utáhněte, zkumavku **již neotevírejte!**



Skladování a transportní podmínky

- Zkumavku s odebranou stolicí uchovávejte před odevzdáním do laboratoře v lednici. Takto připravené vzorky lze uchovávat v chladu (2 – 8 °C) po dobu 7 dnů. Pro delší skladování, maximálně 6 měsíců, je třeba vzorek zamrazit na -20 °C.
- Odběrovou zkumavku bez vzorku stolice skladujte při teplotě 2 – 30 °C, nemrazte.